



SpotCheck Plus™ | Food Safety Residue

SpotCheck Plus detecta la presencia de glucosa y lactosa en una superficie como un indicador rápido de la higiene en la superficie. Simplemente limpie la superficie, libere el reactivo y cualquier residuo que contenga glucosa y/o lactosa que esté presente volverá el reactivo de color verde. Cuanta más contaminación este presente, más rápido será el cambio de color y más oscuro es el color. SpotCheck Plus valida inmediatamente la higiene de la superficie, lo que permite acciones correctivas inmediatas que deben tomarse en caso de necesidad. ¡Si se pone verde, no está limpio!


Beneficios:

- Dispositivo compacto, todo-en-uno
- Fácil de interpretar el color de los resultados
- No hay necesidad de instrumento
- Resultados en 60 segundos
- Hisopo pre-humedecido para una colección, recuperación y detección confiable
- 100% reciclable
- 18 meses de vida útil a temperaturas refrigeradas (2-8°C)
- 4 semanas de vida útil a temperatura ambiente (21-25°C)

Sensibilidad:

- Detecta hasta 2.5 μ moles D-glucosa o 5.0 μ moles lactosa en 60 segundos
- Descartar cualquier cambio de color después de 2 minutos

Color del resultado:

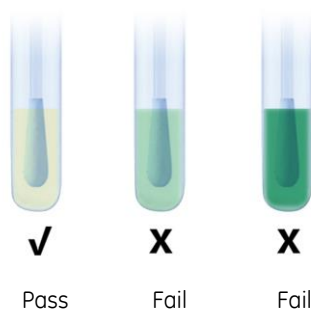


Ver video instructivo en
youtube.com/HygienaTV



Encuentre documentos de apoyo, videos instructivos y más en www.hygiena.com

No. de Catálogo	Descripción	Cantidad
GL100	SpotCheck Plus	100

Procedimiento para el SpotCheck Plus:

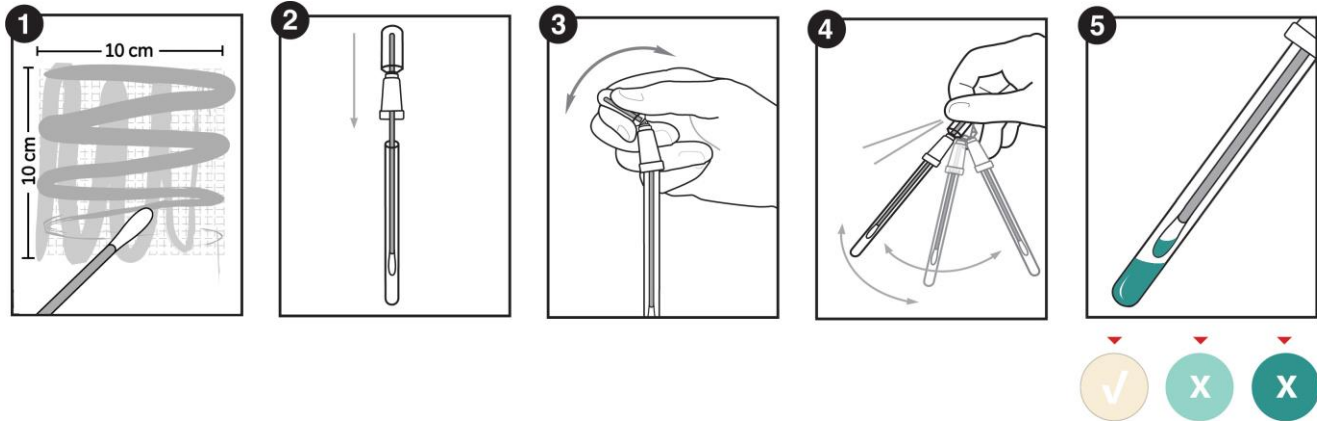

Productos relacionados:



AllerSnap

AllerSnap es una prueba colorimétrica para la prevención alérgenos para una detección amplia de alérgenos en 15-30 minutos. Allersnap detecta hasta 3 µg de proteína.



ProClean

ProClean es un dispositivo rápido y fácil de usar para monitorear la limpieza de las superficies y salvaguardar la calidad del producto. ProClean detecta residuos de proteínas que quedan en la superficie después de la limpieza, dando resultados de 1 a 10 minutos sin requerir de ningún tipo de instrumentación.



EnSURE

El EnSURE es un luminómetro de alta sensibilidad que mide múltiples pruebas tales como las pruebas de ATP, TVC, Coliformes, *E. coli* y más, todo en un sistema. El sistema de monitoreo incluye el software SureTrend para el seguimiento y manejo de datos.

No. de Catálogo	Descripción	Cantidad
ALS-100	AllerSnap Allergen Prevention	100
PRO100	ProClean Protein Residue Test	100
ENSURE	EnSURE Monitoring System	1