

EnSURE™ Touch

Control más inteligente. Diseñado para ti.

EnSURE™ Touch es un sistema de monitoreo avanzado que recopila, analiza y reporta datos de múltiples pruebas de calidad como ATP, microorganismos y enzimas. Con una pantalla táctil de 5 pulgadas, tecnología inalámbrica de sincronización de datos, software basado en la nube y capacidad para llevar a cabo un amplio rango de pruebas, EnSURE Touch está diseñado para adaptarse a tu lugar de trabajo proporcionando los datos que necesitas para realizar una auditoría y controlar posibles riesgos.



Test rápido: Realiza una prueba desde cualquier lugar en dos pasos.



Usuarios: Gestiona las competencias de los usuarios para diferenciarlos. Control mediante administrador mejorado.



Lugares: Crea sobre la marcha puntos de muestreo con campos personalizados y límites de aprobado/ no aprobado sin necesidad de un software adicional.




Resultados & Reportes: Fácil visualización de resultados y análisis de tendencias.



Sincro: sincroniza los datos de modo inalámbrico con SureTrend Cloud.



MicroSnap™: Muestra los resultados de las pruebas para microorganismos como Coliformes, E. Coli, Enterobacterias y Recuento Total.*

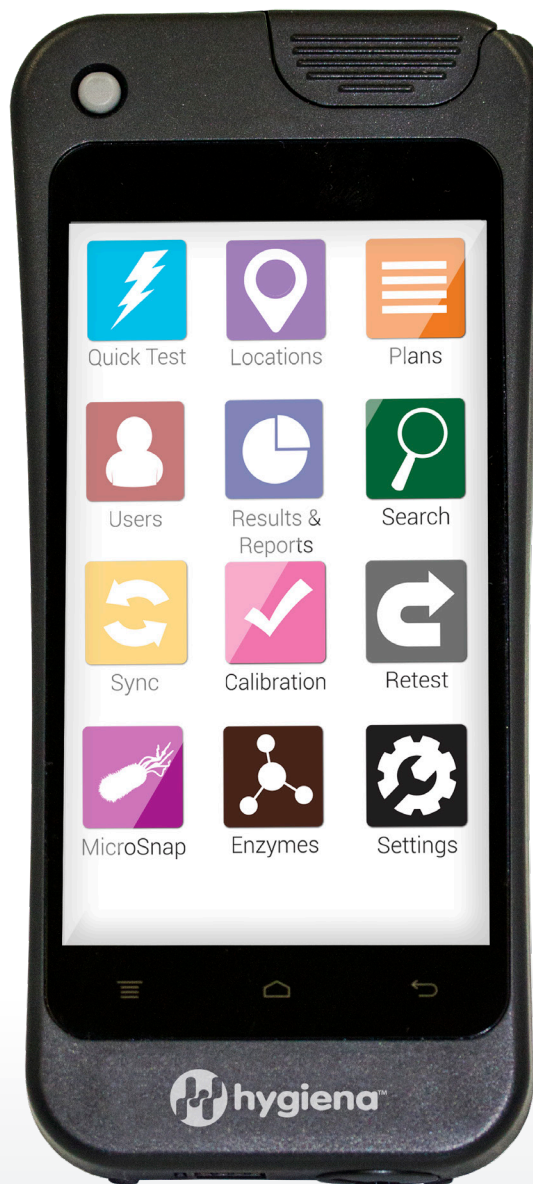

Planes: Agrupa fácilmente las localizaciones en planes de muestreo y combina las agrupaciones para asegurar la cobertura de todos los puntos.



Búsqueda: Encuentra rápidamente planes de muestreo y las localizaciones acortando el tiempo entre las pruebas.



Reexamina: Vuelve sobre localizaciones de pruebas fallidas y realiza de nuevo tests instantáneamente para valorar la efectividad de la acción correctiva.



Ajustes: configura ajustes según idioma, personaliza los campos, tipos de análisis, simula resultados de equipos de otros proveedores y contacta con soporte técnico.



Calibración: Controles permanentemente configurados y calibrados de fábrica. Cumple con las normas GMP/ISO.



Enzimas: analiza y muestra resultados de enzimas como la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida.

Características y Beneficios


- Tecnología avanzada de fotodiodo y química combinada con algoritmos únicos hacen que el EnSURE™ Touch de Hygiena sea el sistema más sensible y duradero disponible en el mercado
- No requiere calibraciones anuales
- Con capacidad de compartir la pantalla, lo que permite el soporte remoto directamente en el dispositivo
- Conectividad inalámbrica o por USB con software basado en la nube o instalado en el ordenador
- Pantalla táctil de 5 pulgadas muy resistente y sensible. Funcional también usando guantes
- Funciona como un smartphone y se configura según tus necesidades
- Su capacidad para simular con precisión otros equipos permite una rápida adaptación del sistema
- Su configuración permite activar funciones inteligentes que optimizan y prolongan la vida de la batería
- Sensores de inclinación para garantizar la realización de la prueba en cada ocasión

SureTrend Cloud



- Su panel de control interactivo permite una rápida visualización de los datos
- Configura fácilmente uno o varios instrumentos desde una sola cuenta con el software SureTrend
- Los resultados de las pruebas están disponibles a través de una o varias funciones
- Programa informes automáticos enviados directamente a tu bandeja de entrada
- Soporte online y centro de recursos a solo un clic
- Actualizaciones opcionales de software mediante red inalámbrica

Tests Compatibles

ATP	Indicador de microorganismos*	Eficacia en los procesos*
UltraSnap 	MicroSnap™ EB	ZymoSnap™ ALP
SuperSnap	MicroSnap™ E. coli	CROSS CHECK
AquaSnap™ FREE	MicroSnap™ TOTAL	
AquaSnap™ TOTAL	MicroSnap™ COLIFORM	

Especificaciones

- Memoria: 2Gb de memoria interna y almacenamiento ilimitado en la nube
- Compatible con WI-FI
- Batería: batería de iones de litio recargable mediante USB-C**
- Tamaño: 17,7x 7,6x 2,5 cm
- Da soporte en varios idiomas



*Los test para microorganismos y enzimas estarán disponibles en próximas actualizaciones del sistema operativo
 **La vida útil de la batería puede variar según el uso y la configuración